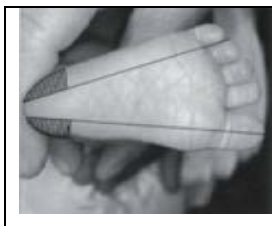

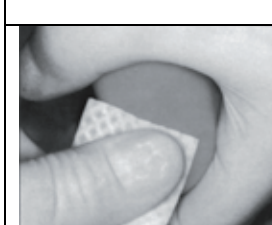







Mode d'emploi

A l'attention du médecin assurant le prélèvement

	<ul style="list-style-type: none">• La zone grisée sur l'illustration indique l'endroit où la ponction peut être réalisée sans danger.
	<ul style="list-style-type: none">• Réchauffer le pied avec un tissu doux mouillé à l'eau chaude jusqu'à 41°C pendant trois à cinq minutes peut accroître le débit sanguin pendant le prélèvement.
	<ul style="list-style-type: none">• Abaisser la jambe du nourrisson plus bas que le cœur pour augmenter le débit sanguin.• Nettoyer le talon à l'aide d'un tampon d'alcool.• Laisser sécher le talon à l'air.• L'absence de séchage complet de la peau risque de diluer l'échantillon et d'altérer les résultats
	<ul style="list-style-type: none">• Effectuer une ponction dans le talon à l'aide d'un dispositif d'incision ou d'une lancette stérile (à une profondeur inférieure à 2 mm). L'utilisation d'un dispositif d'incision peut fournir un meilleur débit sanguin en effectuant une incision de 1 mm de profondeur sur 2,5 mm de long.• Essuyer doucement la première goutte à l'aide d'un tampon de gaze stérile (la première goutte contient des liquides tissulaires qui risquent de diluer l'échantillon).• Laisser se former une autre GROSSE goutte de sang.
	<ul style="list-style-type: none">• Appuyer légèrement le papier filtre sur la GROSSE goutte de sang.• Laisser le sang s'imprégner et remplir entièrement le cercle en une seule application sur la GROSSE goutte de sang. (Pour améliorer le débit sanguin, une pression intermittente TRÈS DOUCE peut être appliquée sur la zone autour du site de la ponction).• Le dépôt de sang ne doit être effectué que sur une seule face du papier filtre.• Ne pas laisser le papier entrer en contact avec la peau du nourrisson.

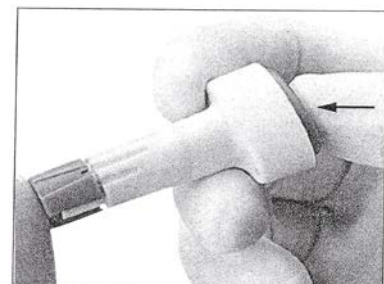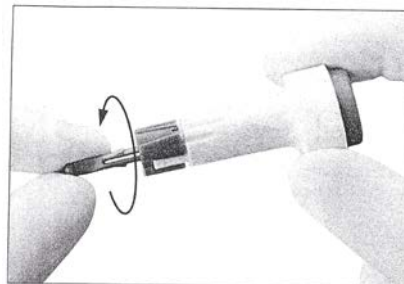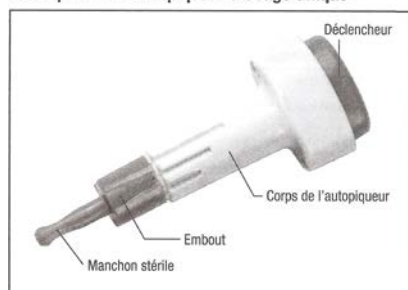Description de l'autopiqueur à usage unique



- Tourner le manchon stérile afin de le retirer puis le jeter. S'il a déjà été ôté, ne pas utiliser l'autopiqueur.
- Presser fermement l'embout de l'autopiqueur contre le talon et appuyer franchement sur le déclencheur.
- La micro-lance se rétracte automatiquement après utilisation. Elle ne peut être utilisée qu'une fois.

1. Sur le recto du buvard, remplir LISIBLEMENT en majuscules d'imprimerie : la date de prélèvement, l'adresse et numéro de téléphone des parents. Faire remplir par les parents le consentement au verso du buvard

○ ○		○ ○		○ ○ ○ ○		S T O P	○ ○	
Remplir les 7 cercles								
1		2		3		4		

NOM : _____ Né(e) le : _____ à _____ heure
 Prénom : _____ Prélevé(e) le : _____ à _____ heure
 Sexe : M ☐ F ☐ Terme (SA) : _____ N-Né à risque de Drépanocytose : OUI ☐ NON ☐
 Nom J.F. Mère : _____ Poids (g) : _____ de Drépanocytose : OUI ☐ NON ☐
 Lieu d'accouchement et Code : _____ N° d'accouchement : _____
 Lieu (si différent) du prélèvement et Code : _____
 Adresse des parents : _____ Médecin à contacter si nécessaire : _____
 Tél. : _____ Ville : _____

Ne pas toucher la surface de dépôt d'échantillon.
Ne pas utiliser si la carte est abîmée.

Whatman 903® YYYY-MM

REF 10539522 Rev.1 LOT XXXXXXXX51

Whatman GmbH
Hahnestraße 3
37586 Dassel
Germany

AUTORISATION

Après avoir été informés, nous soussignés (noms, prénoms) _____

mère, père de l'enfant _____ né(e) le _____

autorisons ☐ n'autorisons pas ☐

les médecins responsables du dépistage néonatal à réaliser, si besoin, un test génétique pour le dépistage de la mucoviscidose.

Fait le _____

Signatures : _____

2. Prélever l'enfant selon les modalités indiquées
3. Imprégner TOUS les cercles, en vérifiant que le sang traverse PARFAITEMENT la fiche
4. Laisser sécher le buvard à température ambiante au moins deux heures loin de toute source de chaleur

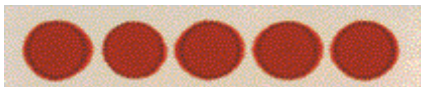
ECHANTILLON VALIDE



ECHANTILLONS NON VALIDES



Echantillon avec une quantité insuffisante de sang pour être testé



Echantillon non sec avant envoi



L'échantillon apparaît comme "saturé"

5. Envoyer le prélèvement dans les plus brefs délais dans une enveloppe verte « T »

